

เครื่องดูดเสมหะพร้อมแบตเตอรี่



แรงดูดสูง

แบตเตอรี่สามารถใช้งานในรถยนต์ ระหว่างเดินทางได้

ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ขพ. 839/2559

**อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

ASKIR 36BR

ป้องกันปัญหาการดูดไม่ขึ้น

แรงดูดสูงถึง 600 mmHg อัตราการไหล 36 l/min
สามารถดูดเสมหะที่ข้นและเหนียวได้อย่างรวดเร็ว
ช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินได้




ป้องกันปัญหาของเหลวเข้าเครื่อง ด้วยระบบป้องกัน ดังนี้




1. ลูกลอยกั้นน้ำล้น
เพื่อปิดน้ำที่จะไหลย้อน
เข้าเครื่อง



2. ฟิวเตอร์ชนิดกั้นน้ำ
ป้องกันเชื้อแบคทีเรีย
และของเหลวที่จะเข้า
ตัวเครื่อง

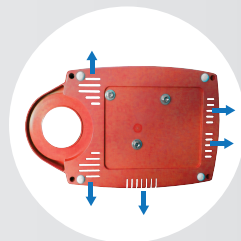

3. ระบบระบายน้ำทิ้ง
ระบบระบายน้ำทิ้ง
ป้องกันไม่ให้น้ำ
ไหลเข้ามอเตอร์

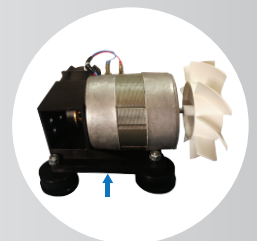

4. มอเตอร์
ยกสูงขึ้นจากฐาน 3 ซม.
เพื่อป้องกัน
น้ำท่วมมอเตอร์